



GENERAL LABORATORY

Citopatologia

REQUISIÇÃO PARA EXAME

DADOS CADASTRAIS

Nome do Paciente: _____

Nome da mãe _____

CPF _____ RG _____ Sexo: _____ Idade: _____

DN: ____ / ____ / ____ Tel: _____ E-mail: _____

TIPO DE EXAME SOLICITADO

Normal Urgente

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Biópsias Simples | <input type="checkbox"/> Citologia em Meio Líquido |
| <input type="checkbox"/> Peças Cirúrgicas | <input type="checkbox"/> Imunohistoquímica |
| <input type="checkbox"/> Colpocitologias | <input type="checkbox"/> Pesquisa Genética (PCR HPV) |
| <input type="checkbox"/> Citologias Gerais | |

DADOS DOS EXAMES

Tipo de amostra (material coletado) _____

Local da biópsia coletado (sítio anatômico) _____

Quantidade de frascos enviados _____

Data da coleta da amostra ____ / ____ / ____ Horário da coleta da amostra _____

ANAMNESE

Informes Clínicos: _____

Hipóteses Diagnósticas: _____

Última Menstruação: ____ / ____ / ____ Usuária de Diu: _____

Histórico de Exames: _____

Observações finais: _____

Assinatura Médico Solicitante - Carimbo Médico - CRM _____

Esta requisição faz parte do exame e deverá acompanhar o material coletado.



Sinônimos

Papanicolaou, citologia esfoliativa, citopatológico cervical, citologia oncótica, citológico cervical.

Material

Raspado cervical (ecto e endocervical).

Coleta

Confeccionar **uma lâmina** e enviar ao laboratório. **Seguir rigorosamente a técnica** para a coleta do material. Enviar a requisição para exame **completamente preenchida**.

Técnica de coleta

Pré-requisitos

A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante sangramento, fora do período menstrual. Abstinência sexual de no mínimo 48 horas; não utilizar ducha, lavagem ou cremes vaginais até 48 horas antes da realização do exame.


• Instruções para coleta

- Identificar a lâmina com as **iniciais** do nome da paciente usando **lápiz**.
- Origem do material: (C) Ectocervical: imprimir uma raspagem de área, com a espátula de Ayre, de forma firme, porém sem causar sangramento. Utilizando movimento de 360 graus, tendo como ponto de apoio o OE; (E) Endocervical: introduzir a escova endocervical no canal e imprimir um movimento de 360 graus.

Procedimento

- 1) **Retirar o excesso de secreção** com gaze, antes de coletar a amostra da ectocérvice.
- 2) Distender o material coletado sobre a lâmina, utilizando-se um único movimento, evitando a sobreposição de material. O espalhamento **deve ser rápido** para evitar dessecação. Evitar a formação de grumos e/ou áreas espessas, bem como, esfregaço muito fino.

Espalhar sobre a mesma lâmina as coletas; C, E, em sentido horizontal/vertical, conforme ilustração abaixo:

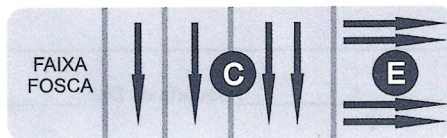

- 3) Fixação em spray: **esta etapa é crítica**. Após a confecção do esfregaço, aplicar **IMEDIATAMENTE**, a uma **distância de 20 cm**, uma camada do fixador sobre todo o material; acondicionar as lâminas em frasco de transporte.
- 4) Identificar devidamente o frasco de transporte com o nome da paciente.
- 5) Encaminhar para o laboratório o frasco juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.